

## MASCARILLA DE 3 CAPAS CON ELÁSTICO



## DESCRIPCIÓN

**Ref.: 2010BLUE**



Mascarilla de tres capas con elástico. No irritante para la piel. Suave, cómoda, ligera e inodora.

Desechable, resistente a fluidos, hipoalergénica. No contiene fibra de vidrio, sin látex.


Cuenta con 3 capas y gomas elásticas para una mayor protección. Fabricada con un material de alta protección y baja resistencia para que sea más fácil la respiración. Ofrecen una alta resistencia a la rotura ya que tiene los 4 bordes termosellados.

Ajuste con una pieza nasal de aluminio adaptable recubierta de polietileno para evitar posibles rozaduras.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Reutilizable:</b>	NO
<b>Fabricante:</b>	H.D.I&E. CO., LTD
<b>Filtración:</b>	98%
<b>Capas:</b>	3 Capas 25GSM PP + 25 filtro GSM + pp 20GSM PP
<b>Colores:</b>	Blanco, azul o verde.
<b>Material:</b>	Triple capa
<b>Dimensiones:</b>	17.5 × 9.5cm (+/- 0.5cm, elástico).
<b>Presentación:</b>	2.000 unidades/caja.
<b>Código EAN-13:</b>	8436009993135

## COLOCACIÓN

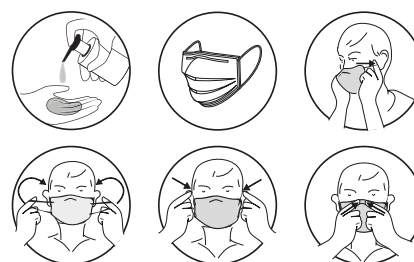

Lávese las manos antes de usar. Coja la mascarilla por los bordes termosellados, nunca por el centro. Colocar en el rostro y ajuste las gomas tras las orejas.


Asegúrese que cubra de nariz a la parte inferior de la barbilla. Ajuste la pinza nasal de aluminio para un ajuste total. Para retirarla, siempre desde las bandas de sujeción, no toque la parte delantera. Deseche la mascarilla y lávese las manos de nuevo.

## ALMACENAMIENTO

Almacenar a temperatura ambiente.

Evite temperatura y humedad excesiva.

**Precaución:** inspeccione el equipo después de un almacenamiento prolongado.

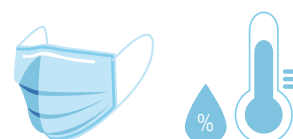

Enlace web: <https://www.patacho.es/producto/mascarilla-con-orejeras-elastica-3-ply-25gsm-pp25-gsm-filter-gsm-pp>